

## Aseptim Plus

**Aktywowana światłem dezynfekcja tkanek.**

**Usuwa 99.99% bakterii. W ciągu kilku sekund.**

Aseptim Plus wykorzystuje aktywowaną światłem laserowym dezynfekcję i pozwala usunąć wszystkie szczepy bakterii występujące w jamie ustnej podczas leczenia kanałowego, periodontycznego, chorób związanych z infekcjami tkanki wokół implantów oraz próchnicy. Technologia zastosowana w Aseptimie znalazła uznanie, czego odzwierciedleniem są testy mikrobiologiczne i kliniczne, opinie użytkowników, liczne publikacje.

### Jak działa Aseptim ?



Technologia oparta jest na dwóch elementach: roztworze rozcieńzonego tolonium winylu i systemie światła laserowego o określonej długości fali (635nm). Wprowadzony w tkankę zębową miękką lub twardą Aseptim selektywnie wybiera bakterie. Aktywowany przez czerwone światło roztwór powoduje uwolnienie dwuatomowego tlenu, który przerywa ściany komórek zabijając bakterie w ciągu kilku sekund.

Zastosowanie Aseptim umożliwia selektywną eliminację

wszelkich bakterii i w przeciwieństwie do innych metod dezynfekcji nie działa na pozostałe tkanki, nie przebarwia dziąseł ani nie zmienia koloru wypełnienia.

### Unikalne korzyści dla ogólnej praktyki stomatologicznej



- Aseptim Plus eliminuje wszystkie bakterie związane z wszelkiego rodzaju chorobami jamy ustnej.
- Aseptim Plus oszczędza czas i pozwala na skrócenie leczenia endodontycznego do jednej wizyty.
- Aseptim Plus działa tylko w miejscu zakażenia i eliminuje potrzebę zastosowania leczenia

antybiotykowego.

- Aseptim Plus to minimalizacja inwazyjności podczas leczenia - proste uzupełnienie standardowej procedury leczenia.
- Aseptim Plus przyspiesza proces gojenia.
- Stosowanie systemu Aseptim Plus jest bezbolesne i chętnie przyjmowane przez pacjentów, zwłaszcza dzieci.
- Aseptim Plus jest bezpieczny, a skutki uboczne jego zastosowania nie są znane.
- Aseptim Plus to małe, przenośne urządzenie, co zapewnia maksymalną elastyczność oraz wygodę użytkownika.

### Korzyści dla pacjentów

- Krótsze leczenie kanałowe.
- Mniejsze prawdopodobieństwo komplikacji podczas leczenia kanałowego.
- Mniej skomplikowane leczenie periodontyczne.
- Mniejsze prawdopodobieństwo komplikacji przy wszczepianiu implantu.
- Mniejsze zapotrzebowanie na środki zwalczające drobnoustroje i agresywne leczenie antybiotykami.
- Mniejsza inwazyjność podczas leczenia.

- Mniejsze ryzyko odsłonięcia miazgi podczas leczenia głębokich ubytków.
- Mniejsze ryzyko utraty zęba.
- Mniejszy strach związany z leczeniem stomatologicznym, szczególnie ważny kiedy pacjentem jest dziecko.

### Aseptim Plus - niezbędny w każdej praktyce stomatologicznej

Aseptim Plus stanowi prawdziwy postęp w dziedzinie minimalizacji inwazyjności w leczeniu stomatologicznym. Dostarcza szybki, skuteczny i prosty sposób dezynfekcji bez skutków ubocznych podczas leczenia:


- kanałowego,
- kieszeni periodontycznych,
- zapalenia tkanki wokół implantu,
- próchnicy.

Dla praktykującego stomatologa istnieją cztery ważne korzyści wynikające z zastosowania Aseptim'a Plus:

- oszczędność czasu – możliwość skrócenia czasu leczenia i czasu pojedynczych wizyt pacjenta,
- leczenie periodontyczne bez konieczności aplikowania antybiotyków,
- przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji w miejscu ulokowania implantu i otaczających go tkanek,
- minimalna inwazyjność procedury i wspieranie procesu naturalnej remineralizacji.

Ponadto, niski koszt leczenia przy zastosowaniu Aseptim jest do zaakceptowania przez pacjentów i generuje dodatkowy przychód w praktyce stomatologicznej. Inwestycja w Aseptim Plus zwraca się w ciągu kilku miesięcy od zakupu.

Aseptim Plus eliminuje następujące szczepy bakterii:

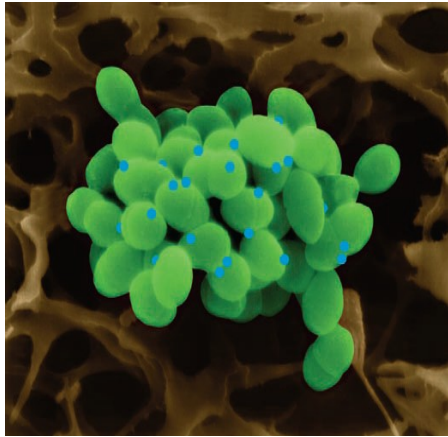

- *Staphalococcus aureus*
- *E.faecalis*

- *Streptococcus mutans*
- *Total streptococcus*
- *Streptococcus sobrinus*
- *Streptococcus intermedius*
- *Actinomyces*
- *Lactobacillus*
- *Veilonella*
- *Prevotella intermedia*
- *Peptostreptococcus micros*
- *Fusobacterium nucleatum*
- *Porphyromonas gingivalis*

Oraz *Candida albicans*.